
Opera® Signature Koleksiyonu
Kumanda Kılavuzu



operabeds.com
0333 222 8584

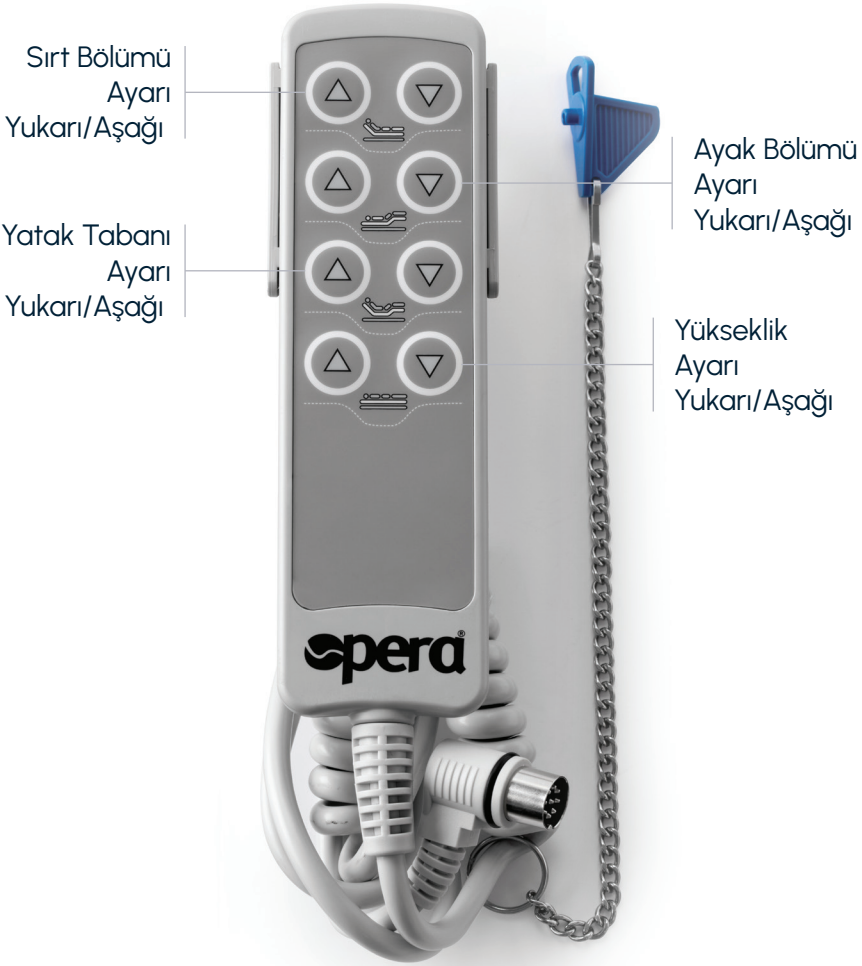

DİKKAT

Hasara yol açmamak için kumanda kullanılmadığında her zaman asılı tutulmalıdır (ör. şilte tabanına veya yan korkuluğa).

Aynı anda yalnızca bir düğmeye basın; birden fazla düğmeye aynı anda basmak sisteme aşırı yük bindirip zarar verebilir.



Tüm elektrikli ayar fonksiyonları hemşire anahtarı (mavi anahtar) ile kilitlenebilir.



Ayar fonksiyonlarını kilitlemek için hemşire anahtarını kilit düzeneğine takın ve kilitli asma kilit konumu seçilene kadar çevirin.



I ve II konumları test ayarlarıdır; yıllık muayenelerde, onarımdan sonra ve yatak her depoya kaldırıldığında yatağın güvenliğini kontrol etmek için kullanılır.

Türkçe çeviri: TEKSAN İnovatif Medikal · 444 00 80 · alisveris.engelliler.biz