
Opera® Solo Koleksiyonu Kumanda Kılavuzu

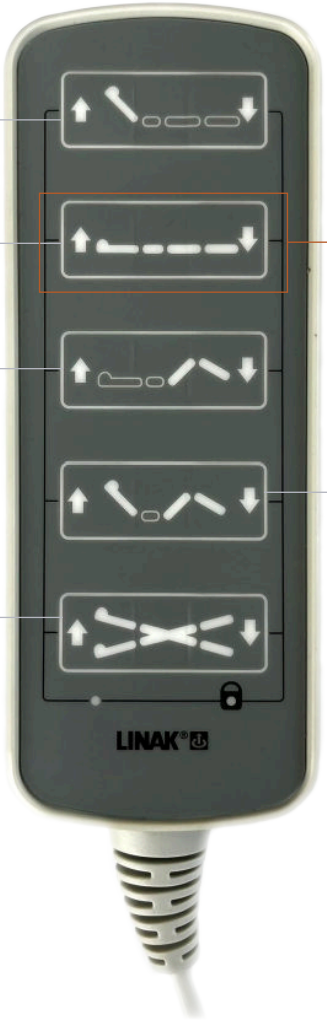

Sırt Bölümü Ayarı Yukarı/ Aşağı

Yatak Tabanı Yukarı/ Aşağı

Diz Kırma Yukarı/ Aşağı

Ters Trendelenburg Hareketi/Normal Seviyeye Dönüş

Sırt ve Diz Kırma Yukarı/ Aşağı

DİKKAT

Yatağı zemin seviyesine indirmek için yükseklik azaltma düğmesine, yatak yerden 32 cm'de durana kadar basın. Çevrenin boş olduğunu kontrol edin ve zemin seviyesine inmek için yükseklik artırma ve azaltma düğmelerine aynı anda basın.

DİKKAT

Hasara yol açmamak için kumanda kullanılmadığında her zaman asılı tutulmalıdır (ör. şilte tabanına veya yan korkuluğa).

Aynı anda yalnızca bir düğmeye basın; birden fazla düğmeye aynı anda basmak sisteme aşırı yük bindirip zarar verebilir.

Yatak çalıştırılırken, ayarlamalar sırasında dengenin sağlanması için yatağın arka tekerlekleri frenli olmalıdır. Opera Solo yatak yalnızca yerini değiştirmek için hareket ettirilmelidir.



Kumandayı kilitlemek için kilit anahtarını kumandanın alt kısmında, "Linak" logosunun yakınında gezdirin. Kumanda kilitlendiğinde Kilit Göstergesi ışığı yanar.

