Solo Teleskopik Yan Korkuluk Kurulum ve Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

1. Sembollerin Açıklaması	2
2. Kurulum ve Devreye Alma	3
3. Teleskopik Yan Korkulukların Kullanımı	10
4. Güvenlik Talimatları	11
5. Genel Bilgiler	12
6. Teknik Özellikler	13
7. Garanti	14

1. Sembollerin Açıklaması



Bu sembolle işaretlenmiş bilgileri dikkatle okuyun ve talimatlara mutlaka uyun. Bu bilgiler güvenlikle ilgilidir.



Bu sembol genel tehlikeleri belirtir. Can ve sağlık açısından tehlike vardır.



Bu ürün Avrupa Birliği'nde ayrı atık toplama yoluyla bertaraf edilmelidir. Normal evsel atıklarla birlikte atmayın.



Talimatları okuyun.

2. Kurulum ve Devreye Alma

2.1 Paket İçeriği

(A) Teleskopik Bölünmüş Yan Korkuluk x 4*



(B) Emniyet Pimi x 8



(C) Bağlantı Çubuğu x 2*



(D) Bağlantı Çubuğu Cıvatası ve Somunu x 8*



(E) Teleskopik Yan Korkuluk Cıvatası ve Kilitli Somun x 16



Başlamadan önce ayrıca şunlara ihtiyacınız olacak:

- Yakınında priz bulunan duvar alanı
- Aletler: İki ayarlı anahtar ve bir alyan anahtarı

*Bunlar ayrı bir kutuda birlikte paketlenmiştir

1

Parçaları bir kenara ayırın

İki kutuyu açın ve parçaları bir kenara ayırın.

Kutularda şu parçalar bulunur:

(A) Teleskopik Bölünmüş Yan Korkuluk x 4

(B) Emniyet Pimi x 8

(C) Bağlantı Çubuğu x 2

(D) Bağlantı Çubuğu Cıvatası ve Somunu x 8

(E) Teleskopik Yan Korkuluk Cıvatası ve Kilitli Somun x 16

A



x 4

B



x 8

E



x 16

D



x 8

C



x 2

2

Yatağı konumlandırın

Yataktaki tüm aksesuarları (şilte, tutunma kolu, yatak örtüleri) çıkarın ve tekerlekleri frenleyin.

Kumandadaki yatak tabanı yükseklik ayarı fonksiyonunu kullanarak yatağı güvenli bir çalışma yüksekliğine kaldırın (bunun nasıl yapılacağı için Solo Yatak Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'na bakın).


3

Bağlantı çubuğunu takın

İki kişi ile bağlantı çubuğunu (C) kaldırıp yatağın alt şasisine doğru getirin; bağlantı çubuğunun L plakasının (çubuğun ortasındaki iki delikli plaka) yukarı baktığından emin olun.

Çubuğun her iki ucundaki bağlantı deliklerini (siyah daire) şasinin baş ve ayak ucundaki bağlantı çubuğu delikleriyle (mavi daire) hizalayın. Bağlantı çubuğu cıvatasını (D) çubuk deliğinden ve şasi deliğinden geçirin. Bir anahtarla cıvatanın başını sabit tutun, ikinci anahtarla cıvatanın ucunu somunla sabitleyin. Somunu şasiye tam olarak sıkın. Bu işlemi dört cıvatanın tümü için tekrarlayın.


Bağlantı çubuğundaki delikler (siyah daire) ve şasideki bağlantı çubuğu delikleri (mavi daire)

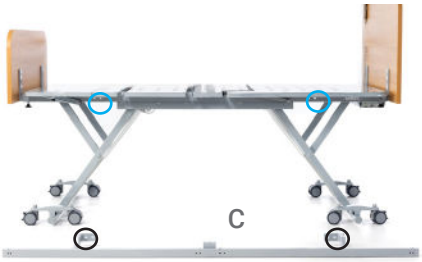

Şasi bağlantı çubuğu delikleri (daire içinde)





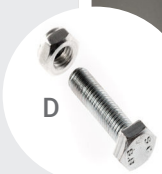

Şasiye cıvatalanmış bağlantı çubuğu




Hizalanmış bağlantı delikleri

4

Bölünmüş yan korkulukları birleştirin

Bölünmüş yan korkulukları (A) ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin (aşağıdaki fotoğraflarda olduğu gibi). Korkuluğun her iki ucundaki alüminyum kılıfları gri plastik parçaların üzerinden aşağı çekin (dikkat: plastik parçalar yağlanmıştır). Emniyet pimlerini (B) her iki uçta kılıfın önündeki ve arkasındaki küçük deliklerden (daire içinde) geçirin.


Kılıfları gri plastik parçaların üzerine geri çekin ve bu adımları her bölünmüş yan korkuluk için tekrarlayın.

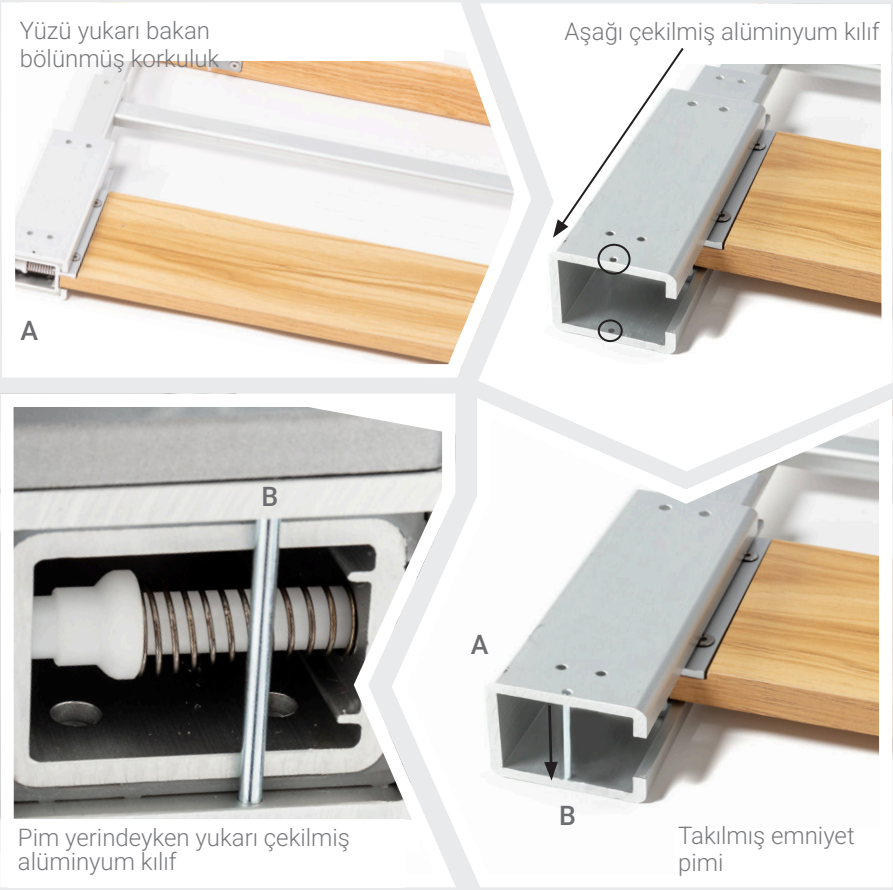


5 Korkulukları bağlantı çubuğuyla hizalayın


Bağlantı çubuğunun yan yüzünde 8 delik vardır (aşağıdaki etiketli fotoğrafa bakın). İki kişi ile bölünmüş yan korkuluğu (A) kaldırın ve alüminyum kılıfındaki iki deliği bağlantı çubuğunun (C) ayak ucundaki iki delikle hizalayın. Korkuluğun alüminyum kılıflarındaki delikler, bağlantı çubuğundaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı deliklerle hizalanmalıdır.

Bağlantı çubuğu

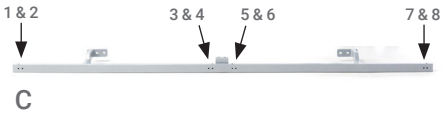

Bağlantı çubuğuyla hizalanmış korkuluk

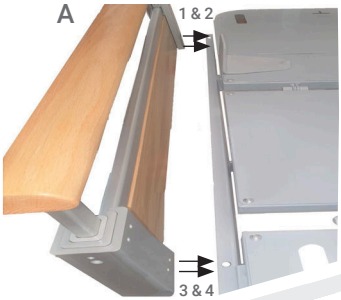

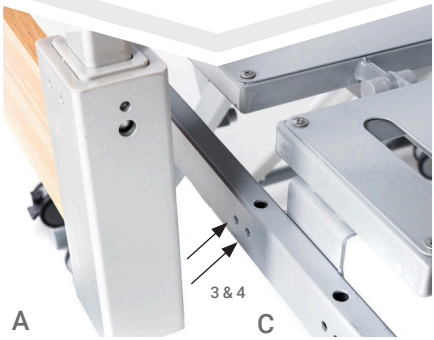

Bağlantı çubuğuyla hizalanmış korkuluk

6


Korkulukları bağlantı çubuğuna sabitleyin

Bölünmüş yan korkuluk hizalandıktan sonra teleskopik yan korkuluk cıvatasını (E) alüminyum kılıftaki deliklerden geçirip bağlantı çubuğunun deliklerine takın. Alyan anahtarı ve bir anahtar kullanarak cıvatayı kilitli somunla (E) sabitleyin ve bağlantı çubuğuna tam olarak sıkın.


Bölünmüş yan korkuluğun diğer tarafı için tekrarlayın. 5. ve 6. adımları diğer tüm bölünmüş korkuluk yarıları için tekrarlayın.

Sabitleme sırasında bölünmüş yan korkuluğu düşürmemeye dikkat edin.

Kılıftan ve bağlantı çubuğundan geçirilmiş cıvatalar (ön)

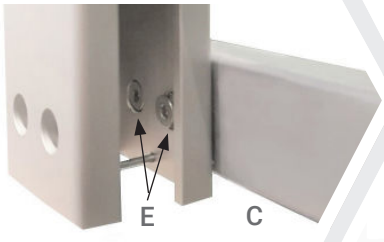

Kılıftan ve bağlantı çubuğundan geçirilmiş cıvatalar (arka)

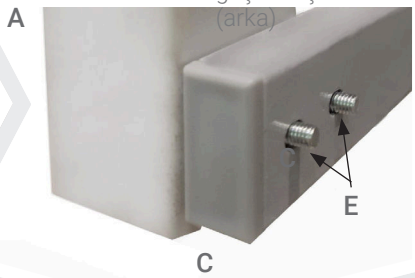



Tüm bölünmüş yan korkulukları takılı Solo yatak



Kilitli somunlarla sabitlenmiş cıvatalar



7 Uygunluğu doğrulayın

Opera Solo Teleskopik Yan Korkuluklarla kullanılan şilteler aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

- Sıkıştırılmamış durumdaki şiltenin üst yüzeyi ile yan korkuluğun üst kenarı arasındaki yükseklik en az 220 mm olmalıdır.

3. Teleskopik Yan Korkulukların Kullanımı

Bölünmüş yan korkulukları kaldırmak için korkuluğun altındaki iki gri sürgüyü (daire içinde) aynı anda içeri çekin. Klik sesi duyulana kadar yavaşça kaldırın.



Bölünmüş yan korkulukları indirmek için iki sürgüyü aynı anda içeri çekin ve hafifçe bastırarak dikkatlice indirin.



Bölünmüş yan korkuluklar yalnızca kullanıcının yataktan düşmesini önlemek için tasarlanmıştır. Korkuluğa yaslanmak veya tırmanmak yaralanmaya yol açabilir.

Bölünmüş yan korkuluklar en yüksek konumdayken yerlerine sağlam şekilde kilitlendiklerinden emin olun. Aksi halde yaralanma meydana gelebilir.

4. Güvenlik Talimatları

4.1 Genel Güvenlik Talimatları

Bilgilendirme sırasında olası tehlikelere özellikle dikkat çekilmelidir; ilk kullanımda kullanım kılavuzu, kullanıcı / bakım personeli tarafından dikkatle ve ayrıntılı olarak okunmalıdır.

Her türlü olay veya sorun TEKSAN İnovatif Medikal'e (444 00 80) bildirilmelidir.



Yatakla ve bölünmüş yan korkuluklarla uyumlu olmayan şilte kullanmayın. Uyumsuz şilteler sıkışma riski ve yaralanmaya yol açabilecek tehlikeler oluşturabilir. Daima uygunluk talimatlarına uyun.



Azami çalışma yükü aşılmamalıdır; aksi halde güvenli kullanım garanti edilemez (teknik verilere bakın).

Ekipmanda hiçbir değişiklik yapmayın; bu, garantiyi geçersiz kılar ve yatağın ve aksesuarların güvenliğini tehlikeye atabilir.



Yan korkuluklar, sıkışma ve düşme risklerini azaltmak için IEC 60601-2-52 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Yan korkuluklar kullanılırken IEC 60601-2-52 uygunluğu için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:

- Çocukların bölünmüş yan korkulukları kullanmasına izin vermeyin; sıkışma, yaralanma veya boğulmaya yol açabilir.
- Hasarlı bölünmüş yan korkulukları kullanmayın.
- Bölünmüş yan korkuluklar bakım yatağından düşmeyi önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır; yaslanmak veya tırmanmak için tasarlanmamıştır, bu yaralanmaya yol açabilir.
- Bölünmüş yan korkulukların güvenle kullanıldığından ve yatağa sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olmak için bağlantıları ayda bir kontrol edin.
- Korkulukları yalnızca eğitimli personel kullanmalıdır.
- Bölünmüş yan korkulukları yavaşça indirin ve düşmelerine izin vermeyin.
- Bölünmüş yan korkulukları yatağın içinden indirmeyin veya kaldırmayın.
- Sıkıştırılmamış durumdaki şiltenin üst yüzeyinden itibaren yan korkuluk yüksekliği

en az 220 mm olmalıdır; buna uyulmaması sıkışma ve yaralanmaya yol açabilir.

- Bölünmüş yan korkuluklar, kullanıcının bakım yatağından yuvarlanmasına karşı ancak sırt ve alt bacak bölümleri yatay konumdayken koruma sağlar.
- Yan korkulukların kullanıma uygun olduğundan emin olmak için daima risk değerlendirmesi yapın.
- Yatağa girip çıkarken bölünmüş yan korkuluğu daima indirin.

5. Genel Bilgiler

5.1 Kullanım Amacı

Opera Solo Teleskopik Yan Korkuluklar, Opera Solo yataklarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bölünmüş yan korkuluklar kullanıcının yataktan düşmesini/yuvarlanmasını önlemeye yardımcı olur; tırmanmak, yaslanmak veya çocuklar için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım koşullarında kullanılabilir.

5.2 Amaç Dışı Kullanım

Amaç dışı kullanım, kullanım amacından sapan ve kullanım kılavuzunda belirtilmeyen her türlü kullanımdır.

Amaç dışı kullanımlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

- Bölünmüş yan korkulukların çocuklarla kullanılması.
- Bölünmüş yan korkulukların Opera Solo dışındaki bir yatakla kullanılması.
- Bölünmüş yan korkuluklarda değişiklik yapılması.
- Bölünmüş yan korkuluklara yaslanılması veya tırmanılması.
- Bölünmüş yan korkulukların uyumsuz bir şilteyle kullanılması.

5.3 Kullanım Ömrü ve Bertaraf

Teleskopik Yan Korkulukların kullanım ömrü kullanım şekline bağlıdır. Sık taşıma, kurma ve ayarlama; ayrıca hatalı kullanım ve güvenli çalışma yükünün aşılması kullanım ömrünü kısaltır. Teleskopik Yan Korkuluklar kullanım ömrü sona erdikten sonra normal evsel



atık olarak atılmamalıdır. Güvenli bertaraf hakkında bilgi için yerel atık geri dönüşüm tesisinize başvurun.

6. Teknik Özellikler

6.1 Teknik Veriler

	Teleskopik Bölünmüş Yan Korkuluk
Uzunluk	970 mm
Ağırlık	5 kg
Yükseklik (en alçak ve en yüksek)	110 mm - 425 mm
Güvenli çalışma yükü (SWL)	75 kg

6.2 Teknik Veriler (Çevresel)

Çalışma sırasında sıcaklık aralığı	5°C - 40°C
Depolama/taşıma sıcaklık aralığı	-10°C - 50°C
Depolama/taşıma bağıl nem	%20 - %90 (30°C'de)
Depolama/taşıma hava basıncı	700 - 1060 hPa

7. Garanti

Türkiye'de bu ürünün garantisi, ithalatçı ve satıcı firma TEKSAN İnovatif Medikal tarafından yasal mevzuat ve satış belgesinde belirtilen koşullar çerçevesinde sağlanır. Servis ve destek için: 444 00 80 · alisveris.engelliler.biz

Opera Care
Azure House, Connaught Road,
Kingswood, Hull. HU7 3AP

0333 222 8584
support@opera-care.co.uk

Türkçe çeviri: TEKSAN İnovatif Medikal · 444 00 80 · alisveris.engelliler.biz